



# Fe-po 食道 モニタリングシステム

## ET-Watcher


医療機器承認番号：22800BZX00223000(温度測定装置)  
22800BZX00224000(カテーテル)

7個の温度センサーを配置することで、  
カテーテルの操作性を軽減

より焼灼部位に近い温度測定を可能にした  
3mm 間隔の温度センサー

-20℃～ +75℃までの温度測定を  
高い信頼性で実現


モニターにカテーテルのデザインを  
記載することで視認性を向上

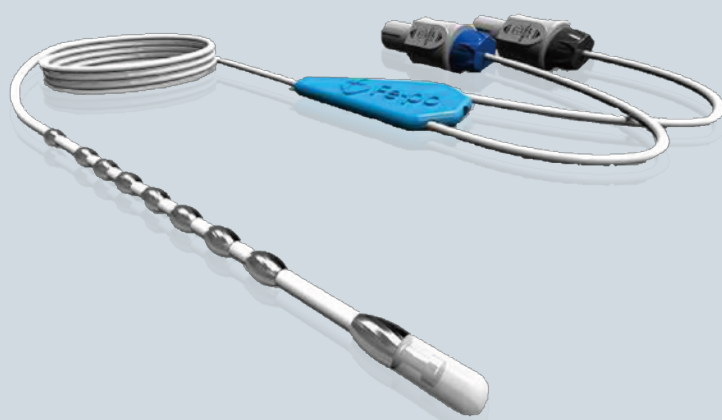


# Fe-po食道モニタリングシステム

## FKD-SP-3

● 温度センサ

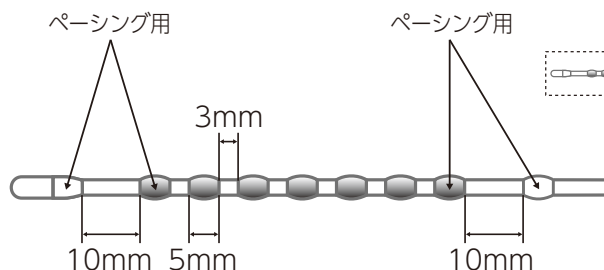

ハンドル	電極長	有効長	電極間
フィックス	5mm	750mm	10-3-3-3-3-3-10

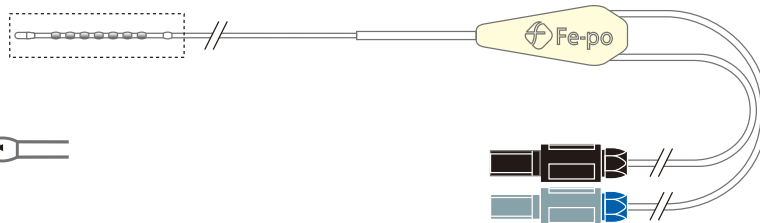

## カテーテル

型式:FKD-SP

温度センサ数	7個
温度センサ電極	5極
温度センサ付き電極	2極
ペーシング電極	2極
電極長	5mm
電極間隔 FKD-SP-3	10-3-3-3-3-3-10
電極間隔 FKD-SP-5*	10-5-5-5-5-5-10
本体直径	6Fr
電極の最大径	10Fr
有効長	750mm
スタイレット	直径 0.35mm(青色) / 直径 0.40mm(白色)

\* 受注発注品

## 温度測定装置

型式:FKD-ST

測定温度範囲	-20℃~+75℃
寸法(幅×高さ×奥行き)	155.7mm×221.7mm ×100.9mm
重量	2.5kg
使用電源	AC100V 50/60Hz
付属品	点滴ポール取付金具

## 付属品

型式	品名
CJY-25CRS5S	食道温接続ケーブル
FKD-PC-100	ペーシング用延長ケーブル
FKD-PC-200	
FKD-PC-300	

一般的名称:経食道体外型心臓ペースメーカー用電極  
販売名:Fe-po食道モニタリングシステム(カテーテル)  
管理医療機器

一般的名称:連続測定電子体温計  
販売名:Fe-po食道モニタリングシステム(温度測定装置)  
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売業者

**フクダ電子株式会社**

〒113-8483 東京都文京区本郷3-39-4

☎(03) 3815-2121(代)

製造販売業者

**日本アメリカ株式会社**

〒161-0033 東京都新宿区下落合2-5-16

お客様窓口… ☎(03) 5802-6600 / 受付時間:月~金曜日(祝祭日,休日を除く) 9:00~18:00

フクダ電子ホームページアドレス… <http://www.fukuda.co.jp/>

- 本製品(ソフトウェアを含む)を日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等必要な手続をお取りください。
- 仕様や機構の一部が変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
- 撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

ご使用前に…

●添付文書および取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●本装置は医療機器ですので接地極付電源プラグを用いて医用コンセントに差込んでください。

ご用命は